
Dale
Medical Products

# Bøyelig ArmBoard Håndleddsstøtte


## Påsettingsanvisninger

1. Rett inn håndleddet med ArmBoard, og bøy til ønsket stilling.
2. Vikle stroppene rundt hånden og håndleddsstøtten slik at de blir passelig stramme. Lukk borrelåsene.

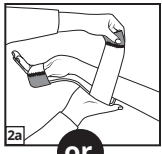


or

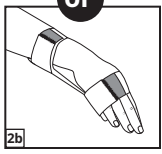


## ⚠ MR Conditional

Bøyelig ArmBoard håndleddsstøtte fra Dale, nr. 650, størrelse Large, er fastslått å være MR Conditional, det vil si trygg ved bruk i visse MR-miljøer.

Funnene etter MR-undersøkelser for Dale 650 ArmBoard håndleddsstøtte gjelder de mindre versjonene (nr. 651, 652 og 653) av ArmBoard, produsert av de samme materialene.

Ikke-klinisk testing viste at bøyelig ArmBoard håndleddsstøtte fra Dale, nr. 650, størrelse Large, er MR Conditional, det vil si trygg ved bruk i visse MR-miljøer. Pasienter med denne enheten kan trygt skannes umiddelbart etter påsetting under spesifikke forhold.

Bare til bruk på én pasient. Til engangsbruk

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com

Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlere av sykehusutstyr / medisinske produkter.

Produsert uten lateks av naturgummi.

Dale er et registrert varemerke for Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.

PHT NON-DEHP DEHP

**Dale Medical Products, Inc.**
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942246 REV F

©Copyright 2024