
Dale
Medical Products

Tala Flexível para o Braço


Instruções de Aplicação

1. Alinhe o pulso com a Tala para o Braço e dobre até a posição desejada.
2. Passe as tiras em torno da mão e da tala na pressão que desejar. Pressione os fechos em gancho para fixar.



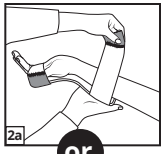

or

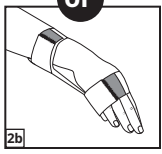

⚠ RM Condicional

Determinou-se que a Tala Flexível para o Braço da Dale, no 650 grande, tem compatibilidade condicional com a ressonância magnética.

Os resultados relativos à RM da Tala para o Braço 650 da Dale aplicam-se às suas versões mais pequenas (nos 651, 652 e 653), feitas dos mesmos materiais.

Testes não clínicos demonstraram que a Tala Flexível para o Braço da Dale, no 650 grande, tem compatibilidade condicional com RM. Um doente com este dispositivo pode submeter-se ao exame com segurança, imediatamente após a sua colocação, sob condições específicas.

Para a utilização numa única doente. Descartável

Para ver um vídeo sobre a aplicação, aceda www.dalemed.com

Os produtos médicos da Dale encontram-se disponíveis no revendedor de materiais hospitalares/médicos da sua preferência.

Não fabricado com látex de borracha natural.

Dale é uma marca registada da Dale Medical Products, Inc. nos EUA, UE e Reino Unido

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942246 REV F

©Copyright 2024