
Dale®
Medical Products

Férula Flexible para el Brazo


Instrucciones de Aplicación

1. Alinee la muñeca con la férula y flexiónela hasta que esté en la posición deseada.
2. Coloque las bandas alrededor de la mano y la férula hasta obtener la presión deseada. Presione los cierres de gancho para fijar el dispositivo en su lugar.



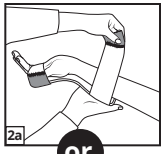

or

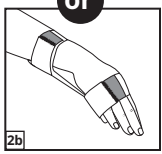

⚠ RM Condicional

Se ha determinado que la Férula flexible para el brazo Dale #650 Grande tiene compatibilidad condicional con la resonancia magnética.

Los resultados relativos a RMN de la Férula flexible para el brazo Dale 650 son aplicables a las versiones de férula más pequeñas (#651, #652 y #653), que están fabricadas con los mismos materiales.

Las pruebas no clínicas demostraron que la Férula flexible para brazo Dale #650 Grande tiene compatibilidad condicional con la RM. Bajo ciertas condiciones específicas, un paciente puede someterse sin peligro a una exploración inmediatamente después de la colocación de este dispositivo.

Para utilizar en una sola paciente. Desechable.

Para ver un vídeo sobre cómo utilizar el producto, visita www.dalemed.com

Los productos médicos Dale están disponibles con su distribuidor preferido de productos para hospitales o médicos.

Fabricado sin látex de goma natural.

Dale es una marca registrada de Dale Medical Products, Inc. en EE.UU., la UE y el Reino Unido.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942246 REV F

©Copyright 2024