
Dale
Medical Products

Böjbar Armskena


Appliceringsanvisningar

1. Lägg armskenan utmed handleden och forma skenan till önskat läge.
2. Linda remmarna runt handen och skenan till önskad spänning. Tryck fast kardborrefästena för att fästa skenan.



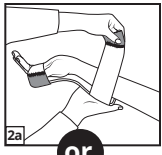

or

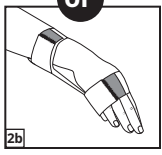

⚠ MR-villkorlig (MR Conditional)

Dale böjbar armskena, nr 650 stor, har bedömts vara MR-villkorlig (MR Conditional).

Fynden avseende MR-resultat för Dale 650 böjbar armskena gäller för de mindre versionerna (nr 651, nr 652 och nr 653) av armskenan, tillverkade av samma material.

Icke-klinisk testning har visat att Dale böjbar armskena, nr 650 stor, är MR-villkorlig (MR Conditional). En patient med denna produkt kan skannas utan risk omedelbart efter appliceringen förutsatt att specifika villkor är uppfyllda.

För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt

För att se en appliceringsvideo, gå till www.dalemed.com

Dale medicinska produkter fås från er försäljare av sjukhus-/medicinska produkter.

Ej tillverkad med naturgummilatex.

Dale är ett registrerat varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA, EU och Storbritannien

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942246 REV F

©Copyright 2024