
Dale
Medical Products

แท่นรองแขนผู้ป่วยแบบโค้งงอ
(Bendable ArmBoard)


วิธีการใช้งาน

1. จัดตำแหน่งข้อมือให้เข้ากับแท่นรองแขน และปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ
2. พันสายรัดรอบมือและแท่นรองแขนและปรับให้แน่นตามที่ต้องการ กดทับที่ติดสายรัดเพื่อยึดให้แน่น



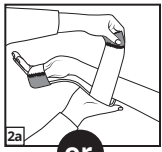

or

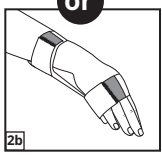

⚠MR เงื่อนไขของ MR

แท่นวางแขนผู้ป่วยแบบโค้งงอขนาดใหญ่ (Dale Bendable ArmBoard, #650) กำหนดให้ใช้ตามเงื่อนไขของ MR

ผลการค้นพบของ MRI สำหรับ Dale 650 ArmBoard ใช้กับเวอร์ชั่นรุ่นเล็กกว่าของผลิตภัณฑ์ ArmBoards (คือ #651, #652 และ #653) ซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน

การทดสอบที่ไม่ใช่จากทางคลินิกแสดงว่าแท่นวางแขนผู้ป่วยแบบโค้งงอขนาดใหญ่ (Dale Bendable ArmBoard, #650) เป็นไปตามเงื่อนไขของ MR ผู้ป่วยที่ใช้อุปกรณ์นี้สามารถสแกนได้ทันทีอย่างปลอดภัยหลังจากจัดวางอุปกรณ์ภายใต้เงื่อนไขโดยเฉพาะ

สำหรับผู้ป่วยใช้ครั้งเดียว ใช้แล้วทิ้ง

สำหรับวิดีโอแสดงวิธีการใช้ กรุณาไปที่ www.dalemed.com

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีบริการจากโรงพยาบาล/ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท่านชื่นชอบ

ไม่ได้ทำจากยางลาเท็กซ์ธรรมชาติ

Dale เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร

PHT DEHP NON-DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
โทรศัพท์: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942246 REV F
©Copyright 2024