
Dale
Medical Products

Bükülebilir Kol Tahtası


Uygulama Talimatı

1. Kol Tahtasını bilekle hizalayın ve istenen pozisyonda bükün.
2. Şeritleri el ve tahta etrafında istenen gerginlikte sarın. Sabitlemek üzere cırt bantların kanca kısımlarına bastırın.



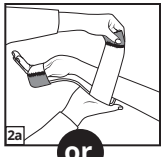

or

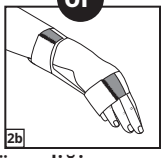

MR Koşullu MR Güvenliği

Dale Bükülebilir Kol Tahtası #650 Large ürününün Koşullu MR güvenliği olduğu tespit edilmiştir.

Dale 650 Kola Tahtası için MRI sonuçlarına ilişkin bulgular, aynı malzemeden üretilen daha küçük Kol Tahtası versiyonları (#651, #652 ve #653) için de geçerlidir.

Klinik olmayan testler Dale Bükülebilir Kol Tahtası #650 Large ürününün Koşullu MR güvenliğine sahip olduğunu göstermiştir. Ürün belirli koşullar altında yerleştirildikten hemen sonra hasta güvenli olarak taranabilir.

Tek hastada kullanılmak üzeredir. Tek kullanımlıktır

Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com web sitesine gidiniz.

Dale tıbbi ürünleri tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme tedarikçilerinden sağlanabilir.

Doğal kauçuk lateksten üretilmemiştir.

Dale, Dale Medical Products, Inc. şirketinin ABD, AB ve İngiltere'de tescilli ticari markasıdır.

PHT NON-DEHP DEHP

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942246 REV F

©Copyright 2024