


REF 675


Dale
Medical Products

IV-ARMOR®


Istruzioni per l'Applicazione


Applicazione Anticubitale

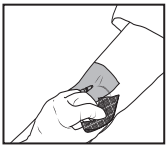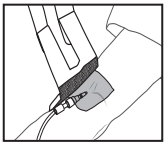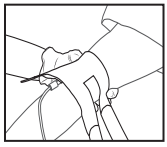

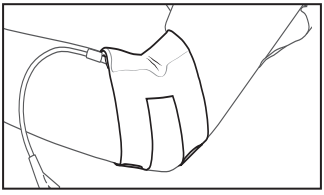Applicazione sulla Mano

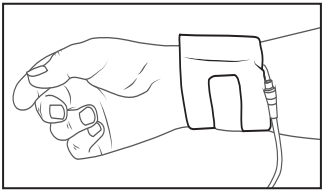

Applicazione sull'Avambraccio

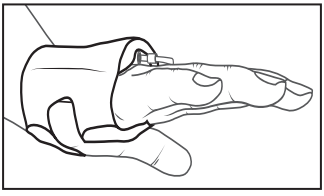

Per ulteriori informazioni, vedere il verso.



Può essere tagliato su misura

Informazioni Sugli Ordinativi

675	**IV-ARMOR®** Adatto alla maggior parte delle persone	10/scatola

Monopaziente. Monouso.

Non prodotto con lattice di gomma naturale

Brevetto USA n. www.dalemed.com/patents

Dale e IV-ARMOR sono marchi registrati di Dale Medical Products, Inc. negli USA, nell'UE e nel Regno Unito.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE


942254 REV C

©Copyright 2024

REF 675

Dale Medical Products

IV-ARMOR®

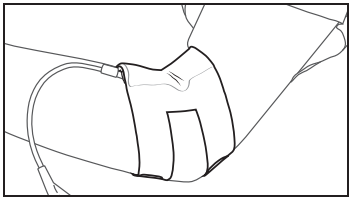


Istruzioni per l'Applicazione

1. Predisporre e cerottare la linea IV in conformità al protocollo ospedaliero.


2. Strofinare in modo uniforme il preparato di pulizia e antisepsi della cute sulle aree cui aderisce il cerotto. Lasciarlo asciugare per circa 30 secondi.


3. Centrare il tampone sull'IV e la medicazione. Determinare se la lunghezza dei lembi vada ridotta per evitare sovrapposizioni. Se necessario, tagliarli prima di rimuovere il rivestimento.

*Non tagliare da un lato più di 5 cm. Se bisogna accorciare la copertura per più di 5 cm, rifilare il secondo paio di lembi del prodotto.

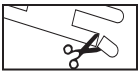


4. Staccare il rivestimento e premere il prodotto, facendolo aderire al paziente con moto continuo, un lato per volta. Non stirare la copertura durante l'applicazione.

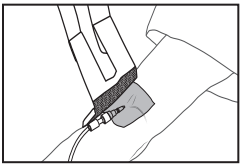

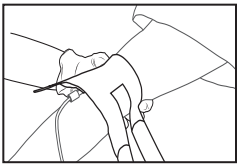

Rimozione: il dispositivo va rimosso con cura per evitare di traumatizzare la pelle. Riapplicare il preparato di pulizia e antisepsi della cute prima di usare un dispositivo nuovo.

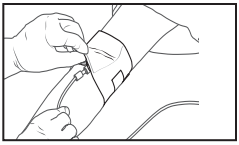

Per ispezionare il sito di inserzione intravenosa, sollevare la sezione centrale del prodotto per visualizzare l'area interessata.

Mantenere la copertura pulita e asciutta
Cambiare dopo 3 giorni o prima se necessario

Dale e IV-ARMOR sono marchi registrati di Dale Medical Products, Inc. negli USA, nell'UE e nel Regno Unito.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942254 REV C

©Copyright 2024