
Dale
Medical Products

Postoperativ BH

Brugsanvisning

1. Løsn stropperne og anbring BH'en under patienten.
2. Tag fat i begge sider af BH'en og pres dem sammen. Den skal være lidt stram.
3. Sæt stropperne fast øverst på båndet foran på BH'en.
4. BH'en kan nemt justeres ved at trække lukkefligene fra hinanden foran og ved stropperne.

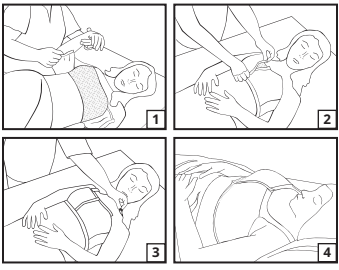

Anden Påføringsmetode

Dale postoperativ BH kan også påføres uden at løsne stropperne ved forsigtigt at føre patientens arme gennem stropperne.

Vask og pleje

Maskinvaskes ved højst 40 °C.

Lufttørres.

Må ikke bleges.

Må ikke stryges.

Må ikke renses kemisk.

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på www.dalemed.com.

Fremstillet uden naturgummilatex.

Bemærkning til brugeren og/eller patienten: Enhver alvorlig hændelse, der måtte opstå i forbindelse med dette udstyr, skal indberettes til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende

Dale er et registreret varemærke tilhørende Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannien.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942166 REV H
©Copyright 2026