
Dale
Medical Products

# Postoperatieve Beha

## Instructies voor het Aanbrengen

1. Maak de bandjes los en plaats de beha onder de patiënt.
2. Pak beide zijden van de beha vast en druk ze samen. Er moet ietwat spanning zijn.
3. Bevestig de bandjes aan de voorzijde van de beha boven aan de band.
4. De beha kan gemakkelijk worden versteld door de sluitingen aan de voorzijde en de bandjes los te trekken.

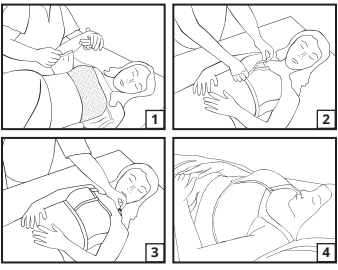


## Op Andere Manier Aanbrengen

De postoperatieve beha Van Dale kan ook worden aangebracht zonder de bandjes los te maken. De armen van de patiënt moeten dan voorzichtig door de bandjes worden geleid.

## Wassen en verzorging

Warm wassen in de machine.

Aan de lijn drogen.

Niet bleken.

Niet strijken.

Niet chemisch reinigen.

Voor gebruik bij één patiënt. Wegwerpbaar.

Een videofilmpje over het aanbrengen van de beha vindt u op www.dalemed.com

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Kennisgeving aan de gebruiker en/of patiënt: elk ernstig incident dat zich met dit hulpmiddel voordoet, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Dale is een gedeponeerd handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS, de EU en het Verenigd Koninkrijk

**Dale Medical Products, Inc.**
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942166 REV H

©Copyright 2026