
Dale
Medical Products

Leikkauksen Jälkeiseen Käyttöön Tarkoitetut Rintaliivit

Käyttöohjeet

1. Irrota olkaimet ja aseta rintaliivit potilaan alle.
2. Tartu rintaliivien kumpaankin puoleen ja paina ne yhteen. Niiden tulisi tuntua jonkin verran kireiltä.
3. Kiinnitä olkaimet rintaliivien etupuolelle niiden yläosan nauhaan.
4. Rintaliivejä on helppo säätää vetämällä etupuolella ja olkaimissa olevat kiinnittimet erilleen.

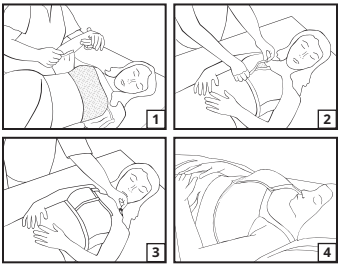

Vaihtoehtoinen kiinnitystapa

Leikkauksen jälkeiseen käyttöön tarkoitetut Dale-rintaliivit voidaan kiinnittää olkaimia irrottamatta pujottamalla potilaan käsivarret varovasti olkaimien läpi.

Pesu ja hoito

40C Konepesu lämpimällä vedellä.

Kuivatus narulla.

Ei saa käyttää valkaisuaineita.

Ei saa silittää.

Ei kemiallista pesua.

Potilaskohtainen. Kertakäyttöinen.

Käytössä opastava video on katsottavissa osoitteessa www.dalemed.com.

Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia.

Käyttäjälle ja/tai potilaalle tarkoitettu tieto siitä, että laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut.

Dale on Dale Medical Products Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942166 REV H

©Copyright 2026