
Dale
Medical Products

Soutien-gorge Post-chirurgical

Instructions pour l'Application

1. Détachez les bretelles et placez le soutien-gorge en dessous de la patiente.
2. Saisissez les deux côtés du soutien-gorge et appuyez pour les connecter. Vous constaterez une certaine tension.
3. Attachez les bretelles à l'avant du soutien-gorge, en haut de la bande.
4. Le soutien-gorge peut être ajusté facilement en détachant les attaches à l'avant et au niveau des bretelles.

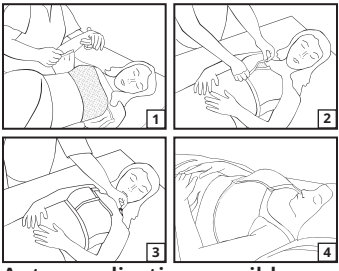

Autre application possible

Le soutien-gorge post-chirurgical Dale peut également être appliqué sans détacher les bretelles en guidant doucement les bras de la patiente à travers les bretelles.

Lavage et Entretien

Lavez en machine à chaud.

Suspendez sur une corde à linge pour sécher.

Ne javellisez pas.

Ne repassez pas.

Ne nettoyez pas à sec.

Pour utilisation par une seule patiente. Jetable.

Pour regarder une vidéo sur l'application, veuillez visiter www.dalemed.com

Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel.

Avis à l'utilisatrice et/ou à la patiente : tout incident grave survenu en relation avec ce dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre à l'endroit où l'utilisatrice et/ou la patiente se trouve(nt).

Dale est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux É.-U., dans l'UE et au R.-U

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942166 REV H

©Copyright 2026