
Dale
Medical Products

Postoperativer BH

Anwendung

1. Die Träger abnehmen und den BH unter der Patientin positionieren.
2. Beide Seiten des BH ergreifen und zusammendrücken. Es sollte eine leichte Spannung spürbar sein.
3. Die Träger an der Oberseite des Bandes vorn am BH befestigen.
4. Der BH kann durch einfaches Auseinanderziehen der Halter an der Vorderseite und an den Trägern eingestellt werden.

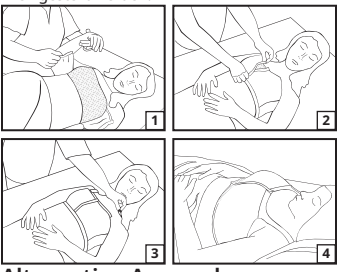

Alternative Anwendung

Der postoperative BH von Dale kann außerdem ohne Abnehmen der Träger angelegt werden, indem die Arme der Patientin vorsichtig durch die Träger geführt werden.

Waschen und Pflege

40C Maschinenwäsche warm.

Auf der Leine trocknen.

Nicht bleichen.

Nicht bügeln.

Nicht chemisch reinigen.

Für den Gebrauch an einer einzelnen Patientin. Einwegprodukt.

Ein Video der Anwendung finden Sie unter www.dalemed.com

Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt.

Hinweis für den Anwender und/oder die Patientin: Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit diesem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder die Patientin ansässig ist, zu melden.

Dale ist eine eingetragene Marke von Dale Medical Products, Inc. in den USA, der EU und Großbritannien

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942166 REV H
©Copyright 2026