
Dale
Medical Products

Μετεγχειρητικός στηθόδεσμος

Οδηγίες εφαρμογής

1. Αποσυνδέστε τις τιράντες και τοποθετήστε τον στηθόδεσμο κάτω από την ασθενή.
2. Πιάστε και τις δύο πλευρές του στηθόδεσμου και πιέστε τις μεταξύ τους. Θα πρέπει να υπάρχει μια σχετική τάση.
3. Συνδέστε τις τιράντες στο μπροστινό μέρος του στηθόδεσμου, στο επάνω μέρος της φάσας του στηθόδεσμου.
4. Ο στηθόδεσμος μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα ανοίγοντας τα αυτοκόλλητα στοιχεία στο μπροστινό μέρος και στις τιράντες.

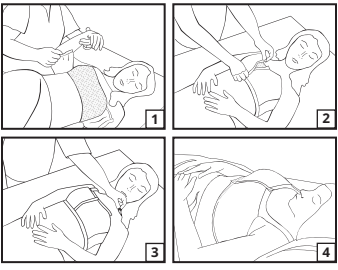

Εναλλακτική εφαρμογή

Ο μετεγχειρητικός στηθόδεσμος της Dale μπορεί επίσης να εφαρμοστεί χωρίς να αποσυνδέσετε τις τιράντες, περνώντας προσεκτικά τους βραχίονες της ασθενούς μέσα από τις τιράντες.

Πλύσιμο και φροντίδα

40C Πλένεται στο πλυντήριο με χλιαρό νερό.

Κρεμάστε το για να στεγνώσει.

Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό.

Μη σιδερώνετε.

Μη χρησιμοποιείτε στεγνό καθάρισμα.

Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο.

Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στον ιστότοπο www.dalemed.com

Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.

Γνωστοποίηση για τον χρήστη ή/και τον ασθενή: κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με το παρόν τεχνολογικό προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Το Dale είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ην. Βασίλειο

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942166 REV H
©Copyright 2026