
Dale
Medical Products

Reggiseno Post-Chirurgico

Istruzioni per l'Applicazione

1. Staccare le spalline e stendere il reggiseno sotto la paziente.
2. Afferrare i lati del reggiseno e premerli assieme. Il reggiseno deve essere un po' teso.
3. Far aderire le spalline alla parte anteriore del reggiseno, in cima alla fascia.
4. La misura del reggiseno può essere regolata facilmente separando gli agganci anteriori e le spalline.

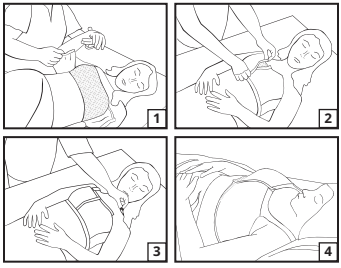

Applicazione Alternativa

Il reggiseno post-chirurgico Dale può essere indossato senza staccare le spalline, infilando gentilmente le braccia della paziente attraverso le spalline.

Lavaggio e cura

Lavaggio a macchina con acqua calda.

Stendere per asciugare.

Non usare candeggina.

Non stirare.

Non pulire a secco.

Per uso singolo. Smaltibile.

Visitare www.dalemed.com per un video dimostrativo.

Non prodotto con lattice di gomma naturale.

Avviso per gli utenti e/o pazienti: qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo deve essere relazionato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro nel quale abbia sede detto utente e/o paziente.

Dale è un marchio depositato di Dale Medical Products, Inc. negli Stati Uniti, nell'Unione Europea e nel Regno Unito.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942166 REV H

©Copyright 2026