
Dale
Medical Products

術後用ブラジャー

使用方法

1. ストラップを外し、ブラジャーを患者の下に敷きます。
2. ブラジャーの両端をつかみ、両端を合わせ押し付けます。少し引っ張った状態になります。
3. ストラップをバンドの上部、ブラジャーの前側に取り付けます。
4. ブラジャーは、前側やストラップにある面ファスナーを外して簡単に調整できます。

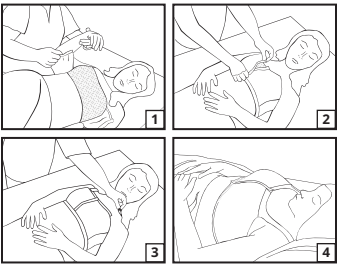

代替使用方法

Dale社の術後用ブラジャーは、ストラップを取り外すことなく、患者の腕にそっとストラップを通して着用することもできます。

洗濯・取扱方法

40C 洗濯機洗い　中温。

吊り干し。

漂白剤使用不可。

アイロン使用不可。

ドライクリーニング不可。

一人の患者のみに使用。使い捨て用。

取扱説明ビデオはwww.dalemed.comでご覧になれます

天然ゴムラテックスは含まれていません。

使用者／患者への通知。本デバイスに関連して発生したいかなる重大な事故も、製造会社及び使用者／患者を管轄対象とする加盟国の所轄官庁に報告すること。

DaleはDale Medical Products, Inc.の米国、EU、英国における登録商標です。

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle・Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942166 REV H
©Copyright 2026