
Dale
Medical Products

수술 후 브라

착용 방법

1. 띠를 분리하고 브라를 환자 밑에 놓아두십시오.
2. 브라의 양쪽을 꽉 잡고 함께 누르십시오. 약간의 팽팽함이 있어야 합니다.
3. 띠를 밴드의 상단에서 브라의 앞면에 붙이십시오.
4. 브라는 앞면과 띠에서 파스너를 벗겨 내어 쉽게 조절할 수 있습니다.

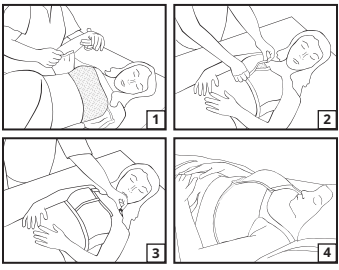

대안 착용법

Dale 수술 후 브라는 띠를 분리하지 않고 환자의 팔을 띠를 통해 살짝 빠져나가게 하여서도 사용할 수 있습니다.

세탁 및 관리

40C 세탁기를 사용하여 온수로 세탁하십시오.

빨랫줄 건조.

표백제 사용 금지.

다림질 금지.

드라이클리닝 금지.

1인 환자 전용. 1회용.

착용 시연 영상을 보시려면, www.dalemed.com을 방문하십시오.

천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.

사용자 및/또는 환자 고지 사항: 이 기기와 관련하여 발생한 심각한 사고는 제조업체에 그리고 사용자 및/또는 환자가 정착한 회원국의 관할 당국에 보고해야 합니다.

Dale은 미국, 유럽 연합 및 영국에서 Dale Medical Products Inc.의 등록 상표입니다

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, 미국
전화: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942166 REV H

©Copyright 2026