
Dale
Medical Products

Postkirurgisk BH

Påsettingsanvisninger

1. Løsne stroppene, og legg BH-en under pasienten.
2. Grip tak i begge sider av BH-en, og press sammen. Den skal skal være litt stram.
3. Fest stroppene til forsiden av BH-en, øverst på stoffremmen.
4. Det er enkelt å justere BH-en ved å løsne festene foran og på stroppene.

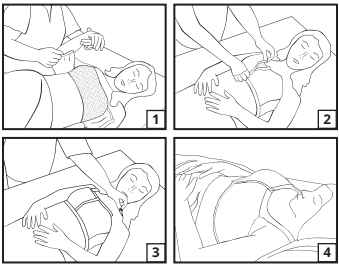

Alternativ Anvendelse

Den postkirurgiske BH-en fra Dale kan også settes på uten å løsne stroppene, ved å føre pasientens armer forsiktig gjennom stroppene.

Vask og stell

Maskinvaskes i varmt vann.

Lufttørkes.

Unngå blekemidler.

Skal ikke strykes.

Skal ikke renses.

Til bruk på én pasient. Til engangsbruk.

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com

Produsert uten naturgummilateks.

Merknad til brukeren og/eller pasienten: Alle alvorlige uønskede hendelser som har oppstått i forbindelse med dette utstyret, skal meldes til produsenten og den kompetente myndigheten i medlemslandet der brukeren og/eller pasienten er etablert.

Dale er et registrert varemerke som tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA, EU og Storbritannia.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

942166 REV H

©Copyright 2026