Dale
Medical Products

Sutiã Pós-Cirúrgico


Instruções de Aplicação

1. Solte as correias e posicione o sutiã sob a doente.

2. Segure os dois lados do sutiã e os prima de encontro um ao outro. Deve ocorrer certa tensão.

3. Prenda as correias à frente do sutiã, na parte superior da faixa.

4. Pode-se facilmente ajustar o sutiã ao se soltar os prendedores na frente e nas correias.

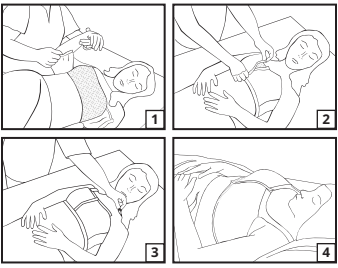

Aplicação Alternativa

Pode-se também aplicar o sutiã pós-cirúrgico da Dale sem que se soltem as correias, bastando para tanto passar cuidadosamente os braços da doente pelas correias.

Lavagem e Cuidados

40C Lavar à máquina com água morna.

Deixar secar pendurado.

Não usar alvejante.

Não passar a ferro.

Não lavar a seco.

Para uso por um único paciente. Descartável.

Para assistir a um vídeo de aplicação, visite www.dalemed.com

Não fabricado com látex de borracha natural.

Aviso ao usuário e/ou paciente: qualquer incidente grave relacionado a este dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o usuário e/ou paciente reside.

Dale é uma marca registrada da Dale Medical Products, Inc. nos EUA, UE e Reino Unido.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942166 REV H
©Copyright 2026