
Dale
Medical Products

Sostén Postquirúrgico

Instrucciones de Aplicación

1. Desprenda los tirantes y coloque el sostén (brasier o sujetador) debajo de la paciente.
2. Agarre los dos lados del sostén y haga presión para unirlos. Debe quedar cierta tensión.
3. Acople los tirantes a la parte delantera del sostén en la parte superior de la banda.
4. El sostén puede ajustarse fácilmente separando las uniones de la parte delantera y los tirantes.

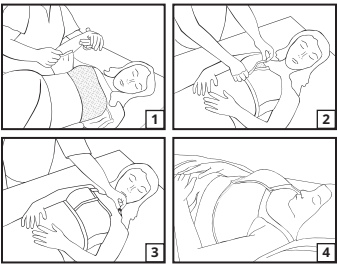

Colocación Alternativa

El sostén postquirúrgico Dale también se puede poner sin desprender los tirantes: guíe suavemente los brazos de la paciente a través de los tirantes.

Lavado y cuidados

40C Lavar a máquina con agua tibia.

Secar colgado en tendedero.

No usar lejía.

No planchar.

No limpiar en seco.

Para utilizar en una sola paciente. Desechable.

Para ver un video sobre cómo colocar el producto, visite www.dalemed.com

Fabricado sin látex de goma natural.

Aviso para la usuaria o paciente: todo incidente grave que ocurra con este producto debe reportarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro de residencia de la usuaria o paciente.

Dale es una marca comercial registrada de Dale Medical Products, Inc. en los EE.UU., la UE y el RU.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942166 REV H
©Copyright 2026