
Dale
Medical Products

Postoperativ Behå

Appliceringsanvisningar

1. Ta loss axelremmarna och placera behån under patienten.
2. Fatta i behåns båda sidor och dra ihop dem. Det ska finnas en viss spänning.
3. Sätt fast axelremmarna på behåns framsida längst upp på bandet.
4. Behån kan lätt justeras genom att man drar isär fästena framtill och vid remmarna.

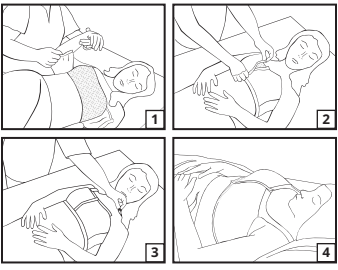

Alternativ Appliceringsmetod

Dale postoperativ behå kan också appliceras utan att man tar av axelremmarna, genom att man försiktigt för patientens armar genom axelremmarna.

Tvätt- och Skötselråd

40C Maskintvättas i varmt vatten.

Dropptorkas.

Använd inte blekmedel.

Får inte strykas.

Får inte kemtvättas.

För användning till en enstaka patient. Engångsprodukt.

För att se en appliceringsvideo, gå till www.dalemed.com

Ej tillverkad med naturgummilatex.

Meddelande till användaren och/eller patienten: Varje allvarlig incident som har inträffat i samband med denna produkt ska rapporteras till tillverkaren och till behörig myndighet i det medlemsland där användaren och/eller patienten är etablerad.

Dale är ett registrerat varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA, EU och Storbritannien.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942166 REV H

©Copyright 2026