
Dale
Medical Products

เสื้อชั้นในหลังผ่าตัดเสริมหน้าอก

วิธีการใช้งาน

1. ถอดสายออกและใส่เสื้อชั้นในข้างใต้ผู้ป่วย
2. จับด้านข้างของเสื้อชั้นในทั้งสองข้างและกดเข้าด้วยกัน ควรมีความตึงเล็กน้อย
3. ติดสายบนด้านหน้าของเสื้อชั้นในตรงด้านบนของ สายรัด
4. สามารถปรับเสื้อชั้นในได้ง่ายโดยลอกเครื่องยึดออกจากกันที่ด้านหน้าและสายรัด

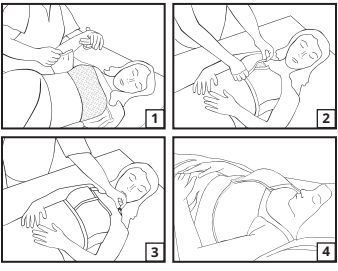

วิธีการใช้ที่เลือกปฏิบัติได้

นอกจากนี้ เสื้อชั้นในหลังผ่าตัดเสริมหน้าอกของ Dale ยังใช้ได้โดยไม่ต้องถอดสายออกด้วยการสอดแขนของผู้ป่วยผ่านสายเสื้อชั้นในด้วยความระมัดระวัง

การซักและการดูแลรักษา

- ซักเครื่องด้วยน้ำอุ่น
- ตากให้แห้ง
- ห้ามใช้สารฟอกขาว
- ห้ามรีด
- ห้ามซักแห้ง

ใช้กับผู้ป่วยเพียงรายเดียว ใช้แล้วทิ้ง

สำหรับวิดีโอแนะนำการใช้งาน โปรดดูที่ www.dalemed.com

ไม่ได้ผลิตจากยางลาเทกซ์ธรรมชาติ

แจ้งให้ผู้ใช้และ/หรือผู้ป่วยทราบ : เหตุการณ์ร้ายแรงใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้ ควรรายงานให้ผู้ผลิตและหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐสมาชิกที่ผู้ใช้และ/หรือผู้ป่วยตั้งอยู่ทราบ

Dale เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale Medical Products, Inc. ในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
โทรศัพท์: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942166 REV H
©Copyright 2026