
Dale
Medical Products

Cerrahi Sonrası Sütyen

Uygulama Talimatı

1. Askıları ayırın ve sütyeni hastanın altına yerleştirin.
2. Sütyenin her iki yanını tutun ve birbirine bastırın. Biraz gerginlik olmalıdır.
3. Askıları bandın üst kısmında sütyenin önüne takın.
4. Sütyen, askılar ve öndeki ayar kısımlarını ayırarak kolaylıkla ayarlanabilir.

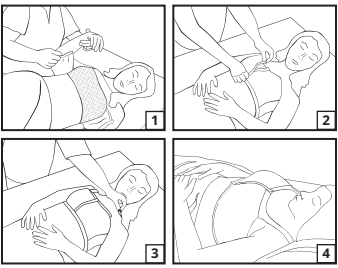

Alternatif Uygulama

Dale Cerrahi Sonrası Sütyen ayrıca hastanın kollarını askılar içinden yavaşça geçirilerek, askıları ayırmadan da uygulanabilir.

Yıkama ve Bakım

40C Ilık suyla makinede yıkayın.

Asarak Kurutun.

Çamaşır suyuna koymayın.

Ütülemeyin.

Kuru temizleme yapmayın.

Tek hastada kullanılmak üzere üretilmiştir. Atılabilir.

Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com adresini ziyaret edin.

Doğal kauçuk lateks içermez.

Kullanıcıya ve/veya hastaya not: Bu ürünle ilgili bir ciddi olay yaşanması durumunda, bu olay üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın ikamet ettiği ülkenin yetkili makamına bildirilmelidir.

Dale, Dale Medical Products, Inc. firmasının ABD, AB ve Birleşik Krallık'ta tescilli ticari markasıdır.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP **MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

CH REP **MDSS CH GmbH**
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau, Switzerland

CE

942166 REV H

©Copyright 2026